


# Mercury

Coppa acetabolare a doppia mobilità

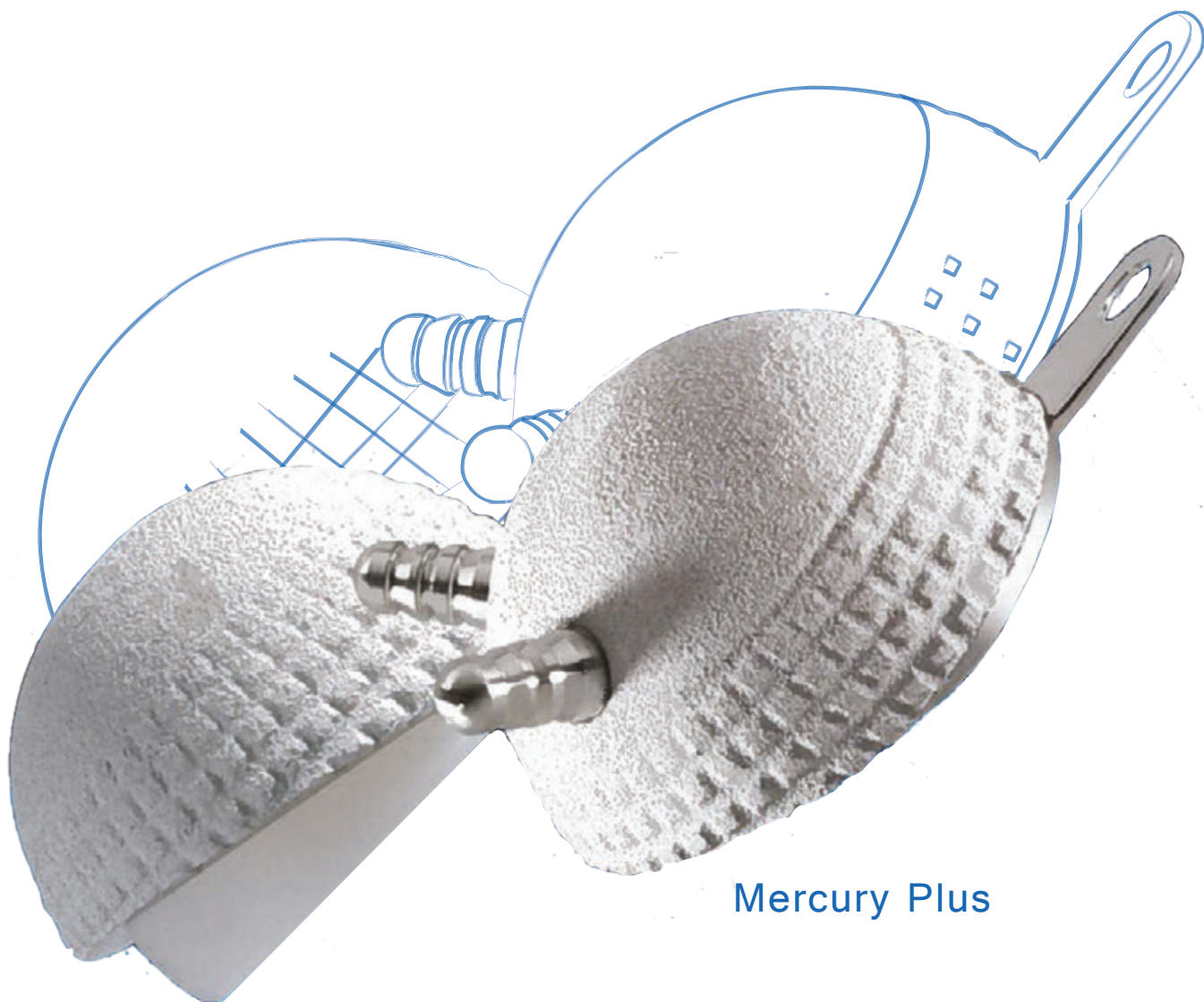

Mercury

Mercury Plus

## Mercury: coppa acetabolare press fit a doppia mobilità

Il principio della doppia mobilità ha dimostrato clinicamente le sue capacità a ridurre:

- i rischi di lussazione
- i rischi di scollamento
- l'usura del polietilene

Coppa in acciaio M30NW con doppio rivestimento in titanio poroso e Idrossiapatite per una rapida osteointegrazione.

Taglio anatomico.

Medializzazione del centro di rotazione dell'articolazione per facilitare il centraggio dell'insero.


Inseri in polietilene Ø 22.2 o 28 con smussi periferici.

Superficie interna liscia e lucidata a specchio.

Bordo raggiato.

Macrostruttura equatoriale in press fit che le conferisce una stabilità primaria.

Polo appiattito per annullare le forze di espulsione.

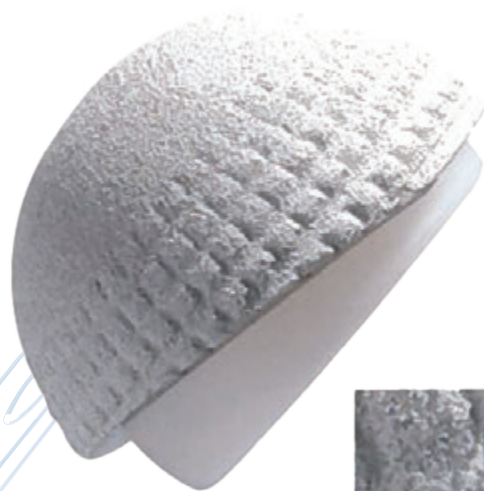

## Mercury Plus: versione press fit ad ancoraggio primario rinforzato

Riprende tutte le caratteristiche del Mercury.

Due tipi di viti e/o perni iliaci.

Un'aletta modellabile per fissare una vite.

Diverse lunghezze di viti.



## Mercury: coppa a doppia mobilità cementata

Macrogeometria della superficie esterna lucidata a specchio per aumentare l'interfaccia osso-cemento.

Coppa disponibile da Ø 42 a Ø 62, realizzata in acciaio inossidabile M30NW (ISO 5832-9).

Taglio anatomico.

Medializzazione del centro di rotazione per agevolare la destinazione dell'inserito.

Inserti in UHMWPE (ISO 5834-1 e 2) con bordi smussi Ø 22.2 o 28 confezionati sotto vuoto.

Superficie interna liscia e lucidata a specchio.

Bordo raggiato.



Descrizione	Riferimento
<b>Coppa a doppia mobilità MERCURY Press fit</b>	
Coppa a doppia mobilità MERCURY - Press fit - Ø44	IMP61441
Coppa a doppia mobilità MERCURY - Press fit - Ø46	IMP61461
Coppa a doppia mobilità MERCURY - Press fit - Ø48	IMP61481
Coppa a doppia mobilità MERCURY - Press fit - Ø50	IMP61501
Coppa a doppia mobilità MERCURY - Press fit - Ø52	IMP61521
Coppa a doppia mobilità MERCURY - Press fit - Ø54	IMP61541
Coppa a doppia mobilità MERCURY - Press fit - Ø56	IMP61561
Coppa a doppia mobilità MERCURY - Press fit - Ø58	IMP61581
Coppa a doppia mobilità MERCURY - Press fit - Ø60	IMP61601
Coppa a doppia mobilità MERCURY - Press fit - Ø62	IMP61621
Coppa a doppia mobilità MERCURY - Press fit - Ø64	IMP61641

**Coppa a doppia mobilità MERCURY PLUS ad ancoraggio primario rinforzato**

Coppa a doppia mobilità MERCURY PLUS - Ø44	IMP61443
Coppa a doppia mobilità MERCURY PLUS - Ø46	IMP61463
Coppa a doppia mobilità MERCURY PLUS - Ø48	IMP61483
Coppa a doppia mobilità MERCURY PLUS - Ø50	IMP61503
Coppa a doppia mobilità MERCURY PLUS - Ø52	IMP61523
Coppa a doppia mobilità MERCURY PLUS - Ø54	IMP61543
Coppa a doppia mobilità MERCURY PLUS - Ø56	IMP61563
Coppa a doppia mobilità MERCURY PLUS - Ø58	IMP61583
Coppa a doppia mobilità MERCURY PLUS - Ø60	IMP61603
Coppa a doppia mobilità MERCURY PLUS - Ø62	IMP61623
Coppa a doppia mobilità MERCURY PLUS - Ø64	IMP61643

**Perni MERCURY PLUS**

Perno Press fit Ø7,2 - Lg. 12	IMP67001
Perno Press fit Ø6,5 - Lg. 17	IMP67002

**Viti corticali MERCURY PLUS**

Vite corticale autofilettante per piattina - Ø4.5 Lg. 36	IMP693604
Vite corticale autofilettante per piattina - Ø4.5 Lg. 40	IMP694004
Vite corticale autofilettante per piattina - Ø4.5 Lg. 42	IMP694304
Vite corticale autofilettante per piattina - Ø4.5 Lg. 46	IMP694604
Vite corticale autofilettante per piattina - Ø4.5 Lg. 50	IMP695004
Vite corticale autofilettante per piattina - Ø4.5 Lg. 55	IMP695504
Vite corticale autofilettante per piattina - Ø4.5 Lg. 60	IMP696004

Descrizione	Riferimento
<b>Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY</b>	
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø42-22,2	IMP63421
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø44-22,2	IMP63441
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø46-22,2	IMP63461
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø48-22,2	IMP63481
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø50-22,2	IMP63501
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø50-28	IMP63502
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø52-22,2	IMP63521
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø52-28	IMP63522
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø54-22,2	IMP63541
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø54-28	IMP63542
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø56-22,2	IMP63561
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø56-28	IMP63562
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø58-22,2	IMP63581
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø58-28	IMP63582
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø60-22,2	IMP63601
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø60-28	IMP63602
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø62-22,2	IMP63621
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø62-28	IMP63622
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø64-22,2	IMP63641
Inserti coppa a doppia mobilità MERCURY Ø64-28	IMP63642

**Coppa a doppia mobilità MERCURY cementata**

Coppa a doppia mobilità MERCURY - cementata - Ø42	IMP61422
Coppa a doppia mobilità MERCURY - cementata - Ø46	IMP61462
Coppa a doppia mobilità MERCURY - cementata - Ø48	IMP61482
Coppa a doppia mobilità MERCURY - cementata - Ø50	IMP61502
Coppa a doppia mobilità MERCURY - cementata - Ø52	IMP61522
Coppa a doppia mobilità MERCURY - cementata - Ø54	IMP61542
Coppa a doppia mobilità MERCURY - cementata - Ø56	IMP61562
Coppa a doppia mobilità MERCURY - cementata - Ø58	IMP61582
Coppa a doppia mobilità MERCURY - cementata - Ø60	IMP61602
Coppa a doppia mobilità MERCURY - cementata - Ø62	IMP61622

**Strumentario**

Kit strumenti doppia mobilità MERCURY	KANC2007
Kit strumenti complementari doppia mobilità MERCURY PLUS	KANC2010

## DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:



**Intrauma S.r.l.** - Via Genova, 19 - 10098 Rivoli (TO) Italia

Tel. +39.011.953.94.96 - Fax +39.011.958.83.85 - info@intrauma.com - www.intrauma.com



Z.I. Rue Lavoisier - B.P. 10 - 52800  
NOGENT - FRANCE  
Tél: +33 (0)3 25 02 72 89

REV. 0/2014



1014